

病人用藥指導卡

Victoza 胰妥善注射液

一、使用步驟

1. 裝置針頭

在使用胰妥善注射筆時，請您利用肥皂將手洗淨



拉開筆蓋，請檢查卡式管內的液體是否澄清無色，不具有懸浮顆粒，若不是請勿使用。



先使用 75%酒精棉片消毒筆型注射器橡皮膜，再取下一支新的拋棄式針頭的保護片，將針頭筆直且緊密地旋入您的注射筆。



取下針頭外蓋並保留下來使用，以供稍後使用。



取下針頭內蓋並丟棄。

使用須知：

- (1) 每次注射時務必使用新的針頭，以避免污染。
- (2) 為避免針扎，絕不可以將以取下的針頭內蓋裝回針頭上

2. 排空

在您使用新的注射筆之前，請務必檢查排空



旋轉劑量設定鈕，使排空標示線和指示線對齊



將針頭向上，握住注射筆，以手指輕彈卡式管數次，使氣泡聚集於卡式管上端。



保持針頭向上，並將按鈕按到 0mg。重覆 E 到 G 的步驟直到針頭尖端出現藥品液滴。若重覆 6 次未出現液滴，表示此注射筆已損壞，您必須使用新的一支

3. 設定劑量


務必確定指示線與 0mg 對齊



1. 旋轉劑量設定鈕至您所需注射的劑量 (0.6mg, 1.2mg 或 1.8mg)。
2. 若您不小心選錯了劑量，僅須往前或往後轉，直到正確的劑量與指示線對齊。
3. 在往後旋轉劑量設定鈕時，小心勿壓到按鈕，以避免藥品流出
4. 若您所需劑量和指示線在未轉到對齊之前就停止了，這表示殘餘的藥量不足以完成一完整的劑量。那您可以：
 - (1)將您的劑量分 2 次注射
 - (2)以一支新的注射筆來注射完整劑量。


4. 注射

- (1) 注射前請先用 75%酒精棉片消毒注射部位，待酒精乾後再注射。注射時以 90 度垂直皮下注射，並停留 15 秒再將針頭拉出，若體型瘦小者以 90 度垂直注射時須捏起皮膚。
- (2) 當您在注射時注意不要用手指觸碰到劑量顯示窗或壓到劑量設定鈕側邊以避免終止注射。
- (3) 拉出針頭後您可能會看到有藥品液滴在針頭尖端這是正常的。
- (4) 將針頭導入外蓋，然後將針頭旋取下來，小心丟棄針頭並將筆蓋蓋上，廢棄針頭蒐集好後交回醫院診間回收。

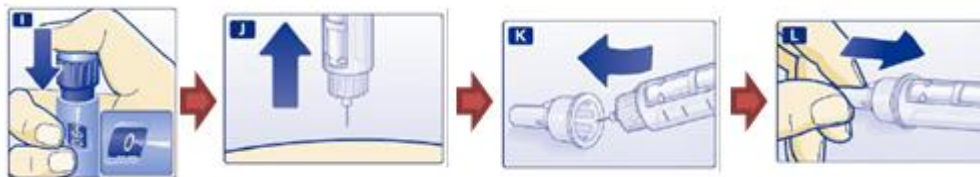

二、 注意事項、副作用、儲存方式

1. 選擇注射部位：以腹部、大腿、或臀部注射部位，輪替注射。
2. 每天相同的時間注射在相同的區域。
(例如，一周內傍晚都注射在大腿)

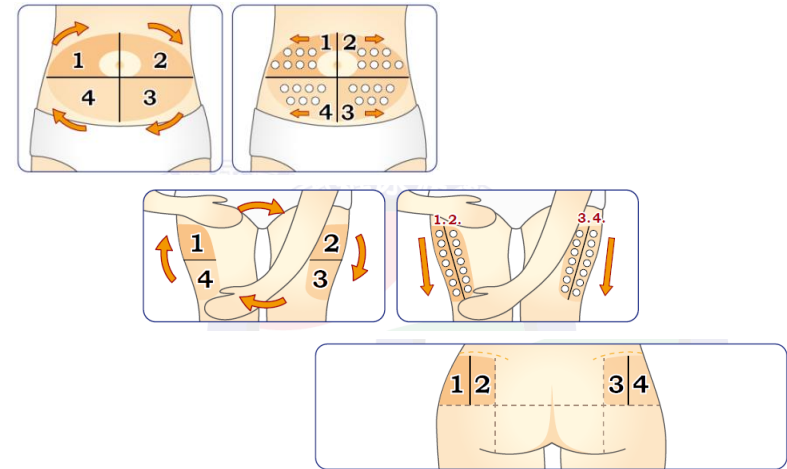

3. 未開封的胰妥善請放置於冰箱冷藏(2-8°C)，存放到有效期限。
4. 已使用的胰妥善，室溫(15-30°C)下可存放 30 天，須避免過熱及日照。
5. 常見的副作用為頭痛、噁心及腹瀉，大部分的患者會隨著時間減緩。



新 北 市 立 聯 合 醫 院
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：
三重院區 (02)2982-9111 分機 3189
板橋院區 (02)2257-5151 分機 2138