# 用藥指導單張

胰島素(Insulin)皮下注射針劑

#### ✓ 打勾處為您本次處方使用的藥品


中文品名	英文品名	成分名	含量
諾和瑞	NovoRapid	速效型胰島素 insulin aspart	300 單位/3 毫升
諾和密斯 30	NovoMix 30	速效型 insulin aspart/中效型 protamine-crystallised insulin aspart = 30/70	,
瑞和密爾	Levemir	長效型胰島素 insulin detemir	300 單位/3 毫升
糖德仕	Toujeo	長效型胰島素 insulin glargine	450 單位/1.5 毫升
諾胰保	Tresiba	長效型胰島 insulin degludec	300 單位/3 毫升

- 1. 適應症:第一型、第二型糖尿病
- 2. 使用劑量:請遵照醫囑皮下注射使用。
- 3. 使用方式:


### 一、 未開封筆針初次使用前準備:



洗淨雙手。

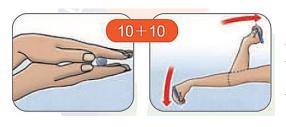


若是使用 "預混型胰島素(諾和密斯 30)" 請將注射筆夾在手掌間滾動並輕輕上下翻 轉至少 20 次。

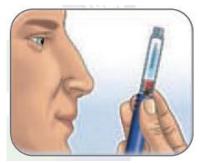


打開筆蓋,目視檢查藥品是否澄清,底部 是否存留結晶物質。

注意:若是使用預混型胰島素(諾和密斯 30)呈現"白色混濁狀"為正常。

請續閱背面

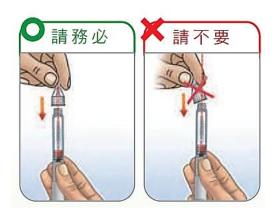


以酒精棉片消毒橡皮塞後,裝上新的針頭,一定要將針頭對正注射筆橡皮塞旋轉。

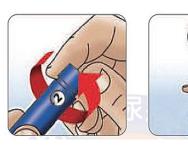




排空步驟:將筆針撥轉至 <u>2 單位</u>,打開針頭外蓋和內蓋,將針頭朝上後,按鈕壓到底,此時會觀察到胰島素藥品從針頭溢出,代表筆針裝置可正常運作。

#### 二、 每次使用之步驟:

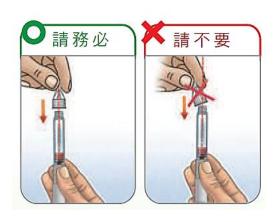

打開筆蓋,以酒精棉片消毒橡皮塞後,裝上新的針頭,一定要將針頭對 正注射筆橡皮塞旋轉。

注意:若是<u>未開封過</u>的筆針初次使用 進行排空步驟後,皮下注射前"不必" 再更換新的針頭。

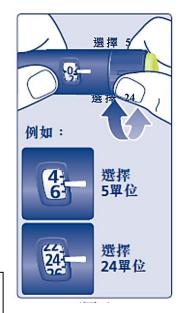

設定劑量:撥轉至所需劑量,如左圖 與指示線對齊。若不小心多轉,可轉 回至正確劑量。



注射藥品:用酒精棉片消毒注射部位,打開針頭外蓋和內蓋,垂直插入注射部位至針頭全部進入皮膚,按壓按鈕到底直到聽見喀的一聲(劑量顯示窗為0),數10秒後再將針頭拔出。

注意: 若注射完畢後皮膚有滲血,建 議用紗布或酒精棉片輕輕按壓,請勿 揉。







蓋回針頭**外蓋**(以針就蓋),旋緊後,取下針頭,丟棄於硬盒回收桶。

<mark>注意</mark>:內蓋直接丟棄,不須再蓋回。

#### 3. 注意事項:

- (1) 可注射部位:腹部、上臂、大腿、或臀部。
- (2) 注射部位輪替原則
  - (1) 在同一區域內輪替注射位置
  - (2) 每天相同的時間注射在相同的區域。

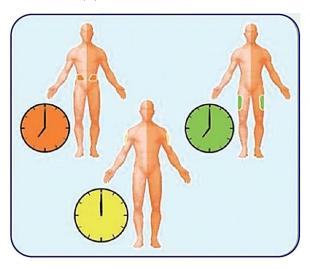

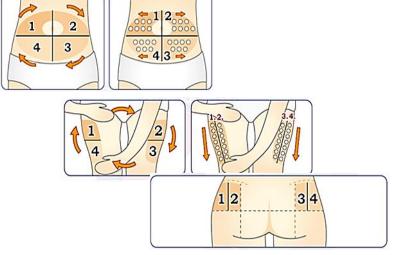

請續閱背面

- (3) 若視力不佳,可將筆針靠近耳朵,利用轉動的聲音數劑量。
- (4) 可從劑量視窗判斷藥品餘量(如右圖所示),當餘量不足 時,請將胰島素丟棄,直接使用新的胰島素。

預混型胰島素(諾和密斯 30)餘量未達 12 單位時,將無法混合均勻,因此餘量不足 12 單位時,請直接使用新的胰島素筆針。

- (5) 每次注射應使用新的針頭,注射完畢後要將針頭取下, 否則隨溫度的改變可能會使藥品漏出。
- (6) 若發生低血糖的症狀,請補充一些含糖份的食物或飲料:
  - (1)養樂多一小瓶
  - (2)糖果 3-5 顆
  - (3)果汁或含糖飲料 120~150c.c.
  - (4)食用砂糖或蜂蜜 1 湯匙 (15c.c.)
- (7) 低血糖症狀包括:顫抖、眩暈、心跳加快、出汗或神智混亂、虚弱、疲勞、面色蒼白或突然感到飢餓。

#### 4. 藥品保存:

<u>未開封</u>的胰島素請放置於冰箱冷藏;<u>巴開始使用</u>的胰島素則不須冷藏,可室 溫存放,保存期限如下:

胰島素品項	室溫保存期限	
NovoRapid 諾和瑞	28 天 (4 週)	
NovoMix 30 諾和密斯 30		
Levemir 瑞和密爾	42 天 (6 週)	
Toujeo 糖德仕		
Tresiba 諾胰保	56 天 (8 週)	



#### 新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊,如有問題請電: 三重院區 (02)2982-9111 分機3189 板橋院區 (02)2257-5151 分機2138

例如: 約剩200單

## 附件:注射部位輪替意示圖

